


## Delta 系列全新升级版 FiveEasy 系列 pH 计 / 电导率仪表



### “一键”操作

可一键完成校准、测量，以及测量模式的切换，彻底简化操作流程。

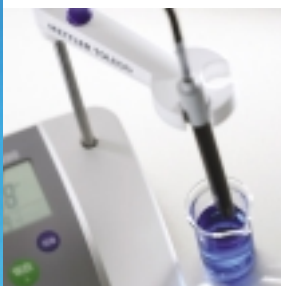

### 简洁型设计，性能可靠

简洁实用的产品设计，可靠的性能，使其成为可以适合任何实验室的基础型仪表。



### 实验室电极

各类实验室电极可满足食品、电厂、生物、纺织、化工、啤酒等行业的 pH、电导、离子、氧化还原电位测量的需求。



### 校准缓冲液

多种校准缓冲液可供选择，方便校准测量。



### FiveEasy 系列

台式 pH 计和电导率仪  
完全满足实验室测量需求：

#### FiveEasy 台式 pH 计：

自动校准、自动识别缓冲液，操作简便。  
自动锁定终点，消除人为读数引起的误差。  
自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。  
电极状态显示，随时提醒电极使用情况。  
仪表上的参比插孔，令电极选择更加灵活，可作为简单离子计使用。

#### FiveEasy 台式电导率仪：

电导率、TDS 两种测量模式直接显示，无需计算。  
自动量程判别，可变分辨率，操作简便。  
可选用不同的电导电极，测量范围广。

技术参数

## FiveEasy 系列

### FiveEasy pH 计 / FiveEasy 电导率仪

	FE20 FiveEasy pH 计	FE30 FiveEasy 电导率仪
测量范围	pH: 0.00...14.00 mV: -1999...1999 mV 温度: 0 °C...100 °C	电导率: 0.00 μS/cm ...199.9 mS/cm TDS: 0.0 mg/L...199.9 g/L 温度: 0 °C...100 °C
分辨率	pH: 0.01 pH mV: 1 mV 温度: 0.1 °C	电导率: 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm 自动可变 TDS: 0.1 mg/L~0.1 g/L 自动可变 温度: 0.1 °C
精度	pH: ± 0.01 pH mV: ± 1 mV 温度: ± 0.5 °C	电导率: ± 0.5 % F.S TDS: ± 0.5 % F.S 温度: ± 0.3 °C
校准	最多 3 点, 4 组预定义缓冲液组	一点, (内置零点自动校正), 3 组预定义标准液
电源要求	220 V/50 Hz 交流电	220 V/50 Hz 交流电



### 标准配置及订货号

#### FE20K (12112501)

- FiveEasy pH 主机
- pH 电极
- 电极支架, 操作手册
- 缓冲液

#### FE20 (12112500)

- FiveEasy pH 主机
- 电极支架, 操作手册
- 缓冲液

#### FE30K (12113501)

- FiveEasy 电导率仪主机
- 电导电极
- 电极支架, 操作手册
- 电导标准液

#### FE30 (12113500)

- FiveEasy 电导率仪主机
- 电极支架, 操作手册
- 电导标准液

### 附件订货信息

#### 附件

附件	订货号
LE 409, 玻璃复合 pH 电极(0-14 pH, 0-80 °C)	12520001
LE 420, 玻璃复合 pH 电极(0-14 pH, 0-80 °C), 适于低离子浓度样品	12100840
LE 438, 三合一电极(0-14 pH, 0-80 °C)	51340242/C
LE 501, 实验室 ORP 电极, 玻璃电极, 可填充(0-80 °C)	12107306
LE 510, 实验室 ORP 电极, 凝胶电极, 不可填充(0-80 °C)	12107307
LE 701, 电导电极(70 μS/cm-199.9 mS/cm, 0-60 °C)	12100938
LE 703, 电导电极(10 μS/cm-200 mS/cm, 0-80 °C)	51340335
LE 427, 针刺型玻璃复合 pH 电极(1-11pH,0-50 °C), 适用于乳酪、果酱等固体 / 半固体样品	51340333
ATC 探棒, ATC 温度探头(-30~+100°C) (NTC 30 kΩ)	477968M-C
pH 4.01 缓冲液(1 瓶 x 250 ml)	51340057
pH 7.00 缓冲液(1 瓶 x 250 ml)	51340059
pH 9.21 缓冲液(1 瓶 x 250 ml)	51300193
4.01/7.00/9.21 pH 缓冲液 各 10 袋 x 20 mL	51302068
84 μS/cm 电导标准液(1 瓶 x 250 ml)	51302153
1413 μS/cm 电导标准液(1 瓶 x 250 ml)	51300138
12.88 mS/cm 电导标准液(1 瓶 x 250 ml)	51300139

上海通今仪器仪表有限公司

上海市虹口区中山北一路 1250 号沪办大厦 1 号楼 401 室 邮编: 200437

联系人: 邱同春 手机号: 13918808901

电话: 021- 65367383 传真: 021-65446003

<http://www.hicoo.com>

<http://www.micro-sh.com>



[www.mtchina.com](http://www.mtchina.com)

访问网站, 获得更多信息