



# MetaServ™ 250

单&双盘磨抛机  
Vector™ & Vector LC 250 动力头



# MetaServ™ 250 磨抛机系列

MetaServ 250系列磨抛机为小批量样品制备应用提供性能，经济性和可靠性的完美组合。通过添加Vector™ LC 250动力头或购买带Vector动力头的MetaServ 250磨抛机，可将标速的单或双盘磨抛机改进为半自动系统。

## 半自动动力头

- 单点力&中心力操作
- 最多可放置6个样品
- 控制模式，力，时间，旋转，水



Vector动力头

## 手动动力头


- 单点力控制
- 经济实用且可机械加载1-4个样品



Vector LC 250动力头

## 多功能性

- 单/双盘可选
- 两种速度范围双盘可选：  
50-500rpm或50-1200rpm
- 手动磨抛标准
- 可选增加Vector或Vector LC 250动力头后，改进为半自动磨抛系统

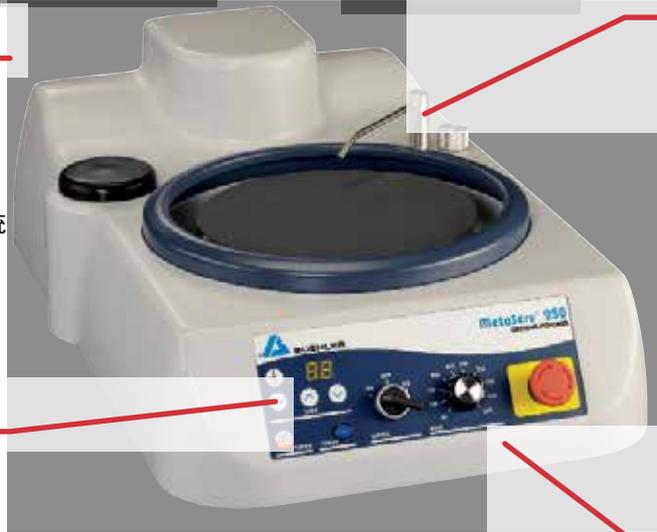

## 清洁

- 可调整的水流喷管提供及时有效的冷却作用
- 内置排水沟和底盘冲洗可最小化残渣堆积

## 易于控制

- 可持续调整转速
- 快速实现急停控制

## 耐用外壳

- 模塑底座提供长期持久的耐腐蚀和耐冲击性

## 概览

- 单盘或双盘，可放置8in [203mm] 或 10in [254mm] 50-500rpm操作范围内的转盘
- 高速双盘，50-1200rpm操作范围内，只提供手动高速磨抛应用
- Vector动力头可在单点力&中心力模式下使用
- Vector LC 250动力头只可在单点力模式下使用
- 内置排水沟和底盘冲洗可最小化残渣堆积
- 在手动和半自动模式下，兼容Burst抛光液配送系统



MetaServ™ 250 单盘



MetaServ™ 250 双盘



MetaServ™ 250 Vector™ 动力头

转盘尺寸/数量	8in [203mm] 10in [254mm] 1个	8in [203mm] 10in [254mm] 2个	8in [203mm] 10in [254mm] 1个
控制	薄膜面板	薄膜面板	薄膜面板
制样类型	手动, 半自动	手动, 半自动	手动, 半自动
动力头	Vector LC 250	Vector LC 250*	Vector动力头
电机	300 Watt		332 Watt
转盘速度	50-500rpm	50-500rpm 或 50-1200rpm <sup>†</sup>	50-500rpm
底座电源	85-264VAC, 50/60Hz, 1 相		
供水压力	不大于100psi [6.8bar]		
供水流量	0.5gpm [2ℓpm]		
尺寸 (宽x深x高)	17.8 x 28.9 x 9.5in [452 x 735 x 242mm] 动力头: 24.5in [662mm] 高	31.7 x 28.9 x 10.2in [805 x 735 x 260mm] 动力头: 24.5in [662mm] 高	17.8 x 28.9 x 23.25in [452 x 735 x 591mm]
重量	44 lbs [20kg] 动力头: 82 lbs [37kg]	119 lbs [54kg] 动力头: 157 lbs [71kg]	82 lbs [37kg]
受控标准	CE和EC指令		

\* Vector LC 250动力头不适用于MetaServ 250双盘高速

† 50-1200rpm只适用于MetaServ 250双盘高速

	Vector LC 250动力头	Vector动力头
动力头速度	60rpm	60rpm
电压/频率	115/230VAC, 50/60Hz, 1相	NA
样品力	单点力: 0-11 lbs [0-50N]	单点力: 0-15 lbs [0-75N] 中心力: 4-60 lbs [20-300N]
样品尺寸	1in, 1.25in, 1.5in, 25mm, 30mm, 40mm	
样品容量	单点力: 1-4	单点力: 1-4/中心力: 3-6
供气	NA	55-85psi [3.8-5.8bar]
驱动适配器	单点力: 60-9005	单点力: 60-9005/中心力: 60-2499

## MetaServ 250-单

操作	底座	动力头	电压/频率
手动	49-10055	n/a	85-264VAC, 50/60Hz
半自动	49-10055	60-10059-115 Vector LC 250	115VAC, 50/60Hz
半自动	49-10055	60-10059-230 Vector LC 250	230VAC, 50/60Hz
半自动	49-10056	包括Vector 动力头	85-264VAC, 50/60Hz

## MetaServ 250-双

操作	底座	动力头	电压和频率
手动	49-10057	n/a	85-264VAC, 50/60Hz
半自动	49-10057	60-10059-115	115VAC, 50/60Hz
半自动	49-10057	60-10059-230	230VAC, 50/60Hz
手动	49-10057HS	n/a	85-264VAC, 50/60Hz

## MetaServ 250 磨抛机附件

40-4061 8in [203mm]	铝盘	30-2008 8in [203mm]	砂纸扣环
40-0500 10in [254mm]	铝盘	95-2825 10in [254mm]	砂纸扣环
16-2071 8in [203mm]	贴有MagnoFix的Apex™ MagnoDisc磁盘	891060 <sup>2,3</sup>	空气压力调节阀
16-2571 10in [254mm]	贴有MagnoFix的Apex™ MagnoDisc磁盘		

## 配合Vector和Vector LC 250动力头卡具



### Vector™ LC 250动力头所用单点力

Part Number	形状	尺寸	容量
60-10060	○	1in	4
60-10061	○	1.25in	4
60-10062	○	1.5in	4
60-10063	○	25mm	4
60-10064	○	30mm	4
60-10065	○	40mm	4

### Vector动力头

Part Number	形状	尺寸	容量
60-3001	○	1in	4
60-3002	○	1.25in	4
60-3003	○	1.5in	4
60-3004	○	25mm	4
60-3005	○	30mm	4
60-3006	○	40mm	4
60-3000		1 x 2	4

### Vector动力头所用中心力 配合使用60-2499适配器

Part Number	形状	尺寸	容量
60-2482	○	1in	6
60-2483	○	1.25in	6
60-2484	○	1.25in	3
60-2422	水滴形	1.25in [32mm]	6
60-2485	○	1.5in	3
60-2486	○	30mm	6
60-2487	○	40mm	3
60-2409	矩形	1 x 1.25in [25.4 x 31.75mm]	4

\* 参见页脚的区域注释查看产品供应范围

## Burst抛光液供给装置

可选购Burst给料系统能够与MetaServ磨抛机相连，在样品制备过程中进行手动和半自动给料操作。该产品通过在固定的时间间隔和可设置的速率基础上，进行给料，提高了生产力和一致性。



40-10005 Burst供给组件(如图)

欲了解更多Burst抛光液供给装置，请查阅标乐产品目录。

标乐公司会持续对产品进行改进，如有更改恕不另行通知。

Sectioning  
AbrasiMet • AbrasiMatic • IsoMet

Mounting  
SimpliMet

Grinding & Polishing  
EcoMet • AutoMet • MetaServ

Imaging & Analysis  
OmniMet

Hardness Testing  
Wilson®

西努光学  
电话：400-6807517  
网址：http://www.cinv.cn  
E-Mail：dushilei@cinv.cn  
地址：上海市浦东新区浦东南路滨江2250号A座301室

**Cinv**  
Your Optical Solutions