



实验室电泳全套解决方案

2D ELECTROPHORESIS

POWER SUPPLIES

BLOTTING

ELECTROPHORESIS REAGENTS

SPECTROSCOPY

RADIATION PROTECTION



PROTEIN ELECTROPHORESIS

NUCLEIC ACID ELECTROPHORESIS


1967年成立于美国旧金山的Hoefer公司，是全球知名的实验室凝胶电泳及相关设备的供应商，其产品设计新颖，规格齐全，品质卓越，多年来已成为业界的一面旗帜。



垂直电泳仪选择指南

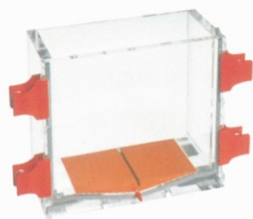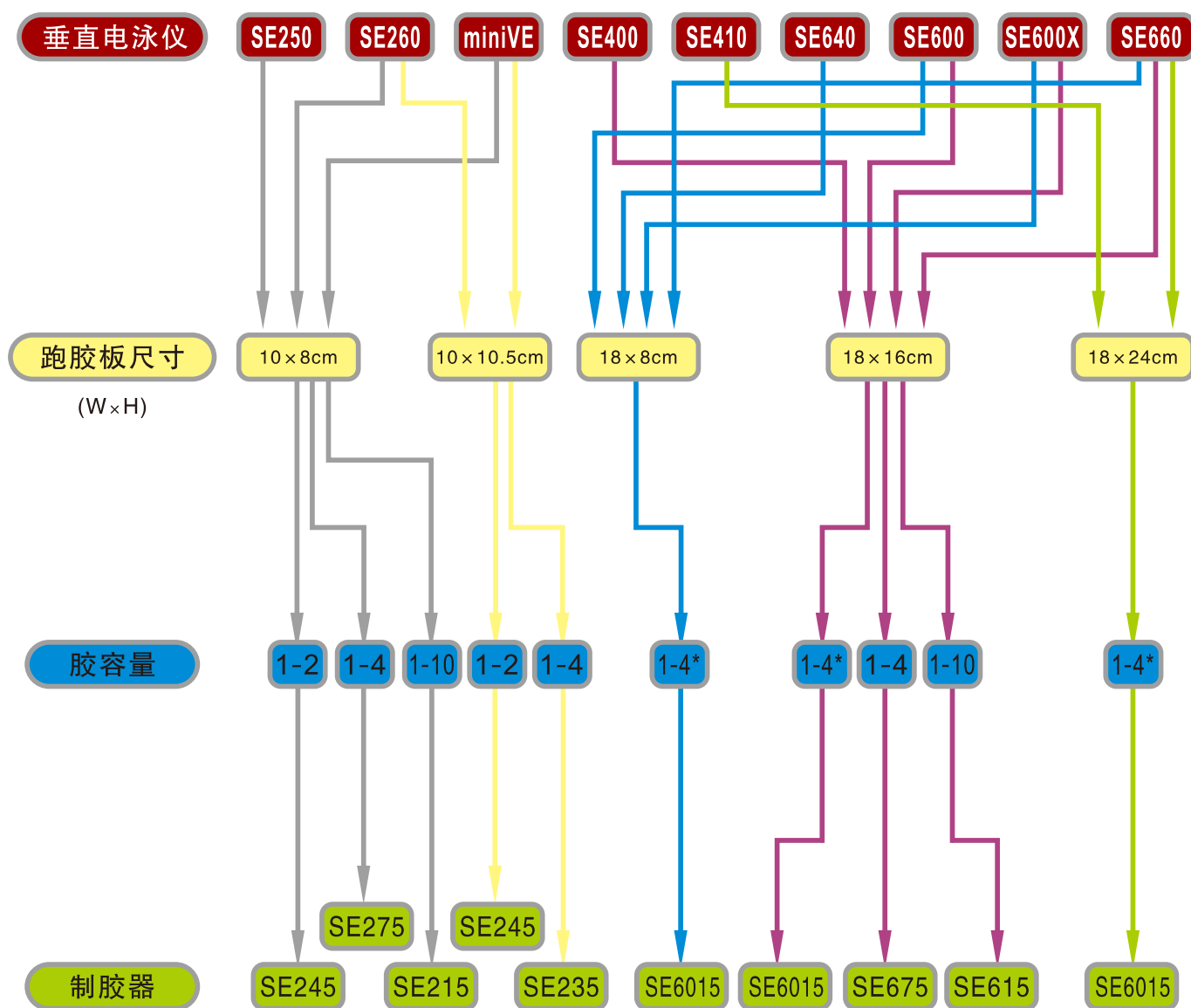


SE615

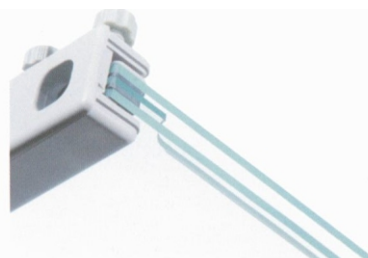

Divider Plate



SE245

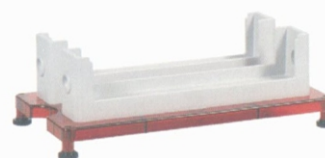

SE6015

SE300miniVE一体化垂直电泳转印仪

产品特点:


- 电泳与转印一体化的单元式设计, 无琐碎零件
- 缓冲液用量少, 经济实用, 仅需300ml溶液即可转印4块凝胶
- 可同时电泳2块10×10.5cm(玻璃板尺寸)的凝胶或转印4块迷你胶
- 灌胶、跑胶同一模具, 操作简便
- 可选配灌胶仪, 实现高通量灌胶

技术参数:

跑胶板尺寸 (w×h)10×10.5cm或10×8cm
 Spacer厚度.....0.75mm, 1.0mm, 1.5mm
 电泳最大电源设定.....500V, 每个模块25W
 转印最大电源设定.....400mA, 每个模块15W
 最高操作温度.....45℃
 操作湿度.....低于80%
 尺寸(W×H×D).....19.2×17.2×18.8cm
 安全认证.....EN61010-1,UL61010A-1,CSA C22.2 1010.1, CE



Se300

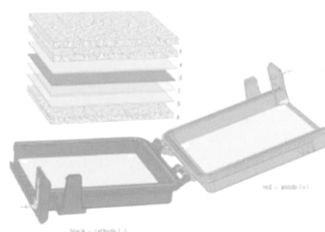

Se302

Ordering Information

Cat.#	Description
SE300-10A-1.0	miniVE Integrated Vertical Electrophoresis Unit,Complete
SE302	miniVE Blot Module

SE300-10A-1.0包含:

- Lower Buffer Chamber(tank)
- Gel Modules with Gaskets 2 assemblies
- Safety Lid with High Voltage Leads
- Glass Plates, Rectangular, 10×10.5cm 3 pcs
- Glass Plates, Notched, 10×10.5cm-3 pcs
- Combs, 10-well, 1.0mm thick 2-pcs
- T-Spacers, 1.0mm thick-4pcs
- Well-Locating Decals-2pcs
- Wonder Wedge Plate Separation Tool
- Gel Seal

SE250/260迷你垂直电泳仪



SE260



SE250

产品特点:

- 专为小型、快速电泳而设计
- 一次性最多可以跑2块胶
- 带有灌胶铝板, 是传统玻璃板散热效率的40倍
- 带有热交换装置, 可外接循环水浴, 精确控温
- SE260: 适用10×8cm的玻璃板, 可使用mini Ve的转印模块进行下游转印
- SE250: 适用10×8cm的玻璃板
- 可选配灌胶仪, 一次灌制多块凝胶


技术参数:

跑胶板尺寸 (w×h)SE260: 10×10.5cm或10×8cm
 SE250: 10×8cm,
 Spacer厚度.....0.75mm, 1.0mm, 1.5mm
 最大电源设定.....500V, 500mA, 12W
 最高操作温度.....45℃
 操作湿度.....低于80%
 安全认证.....EN61010-1,UL61010A-1,CSA C22.2 1010.1, CE

Ordering Information

Cat.#	Description
SE260-10A-1.0	Mighty Small II Deluxe Mini Vertical Electrophoresis Unit,Complete
SE250-10A-1.0	Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis Unit,Complete

SE600系列控温式垂直电泳仪

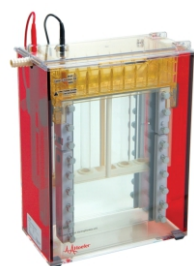


SE660



SE600



SE600X

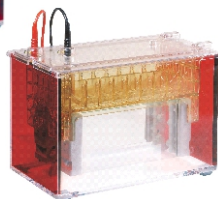

SE640

产品特点:

- 一次可同时电泳4块凝胶，分离多达112个样本
- 内置热交换模块，外接循环水浴后可将凝胶温度均一的维持在1-45℃
- SE600可用18×24cm的跑胶板，可提高电泳分辨率，形成更锐利的条带
- SE600X Chroma豪华型，符合人体动力学的手柄设计，便于操作和移动
- 兼容18×16cm和18×8cm两种跑胶板
- SE600兼容18×16cm和18×8cm两种跑胶板，SE600X Chroma的简化版
- SE640仅适用18×8cm的跑胶板，用于快速分离

技术参数:

跑胶板尺寸 (w×h)SE600: 18×24cm, 18×16cm, 18×8cm

SE600X Chroma: 18×16cm, 18×8cm

SE600: 18×16cm, 18×8cm

SE640: 18×8cm

Spacer厚度.....0.75mm, 1.0mm, 1.5mm

最大电源设定.....1000V, 500mA, 50W

最高操作温度.....45℃

操作湿度.....低于80%

安全认证.....EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE

SE410/SE400经济型垂直电泳仪



SE410



SE400

产品特点:

- 采用传统的蓝式设计，空气散热
- 每次可跑1至2块标准凝胶，是一款经济的标准型垂直电泳
- 可选配divider plate，形成三明治结构，跑2块凝胶
- SE410: 适用于18×24cm的跑胶板，适合加长型凝胶，提高电泳分辨率
- SE400: 适用于18×16cm的跑胶板，用于标准的电泳分离
- 与SE600系列适用同一种梳子、Spacer和跑胶板

技术参数:

跑胶板尺寸 (w×h)SE410: 18×24cm,

SE400: 18×16cm,

Spacer厚度.....0.75mm, 1.0mm, 1.5mm

最大电源设定.....500V, 60mA, 20W

最高操作温度.....45℃

操作湿度.....低于80%

安全认证.....EN61010-1, UL31010-1, CSA C22.2 1010.1, CE

Ordering Information

Cat.#	Description
SE660-15-1.5	Tall Standard Dual Cooled Vertical Electrophoresis Unit, Complete
SE600X-15-1.5	Deluxe Dual Cooled Vertical Electrophoresis Unit, Complete
SE600-15-1.5	Standard Dual Cooled Vertical Electrophoresis Unit, Complete
SE640-15-1.5	Wide-Mini Vertical Electrophoresis Unit, Complete
SE410-15-1.5	Tall Air- Cooled Vertical Electrophoresis Unit, Complete
SE400-15-1.5	Air- Cooled Vertical Electrophoresis Unit, Complete

电泳配件的订货信息

SE600/SE600X Chroma/SE600/SE640/SE410/SE400

梳子

货号	样品孔				
	孔数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	每1mm深度的 上样体积(μl)	数量
标准梳子	皆覆有特氟龙涂层, 抗酸碱				
SE511-10-.75	10	0.75	8.3	6.2	1
SE511-10-1.0	10	1	8.3	8.3	1
SE511-10-1.5	10	1.5	8.3	12.4	1
SE511-12-.75	12	0.75	7.6	5.8	1
SE511-12-1.0	12	1	7.6	7.7	1
SE511-12-1.5	12	1.5	7.6	11.5	1
SE511-15-.75	15	0.75	5.7	4.3	1
SE511-15-1.0	15	1	5.7	5.7	1
SE511-15-1.5	15	1.5	5.7	8.6	1
SE511-20-.75	20	0.75	4.1	3.1	1
SE511-20-1.0	20	1	4.1	4.1	1
SE511-20-1.5	20	1.5	4.1	6.2	1
SE511-28-.75	28	0.75	2.7	2.1	1
SE511-28-1.0	28	1	2.7	2.7	1
SE511-28-1.5	28	1.5	2.7	4.1	1
制备型梳子	可调样品孔深度(深度为10, 15和25mm), 形成1个大的制备型样品孔和1或2个小参比孔。				
SE511-R-.75	1/1	0.75	121/6	90/4	1
SE511-R-1.0	1/1	1	121/6	120/6	1
SE511-R-1.5	1/1	1.5	121/6	183/9	1
SE511-DR-.75	1/2	0.75	113/6	85/4	1
SE511-DR-1.0	1/2	1	113/6	112/6	1
SE511-DR-1.5	1/2	1.5	113/6	171/9	1

Spacer

货号	厚度(mm)	长度(mm)	宽度(mm)	数量
SE6419-2-.75	0.75	8	2	2
SE6419-2-1.0	1	8	2	2
SE6419-2-1.5	1.5	8	2	2
SE6119-2-.75	0.75	16	2	2
SE6119-2-1.0	1	16	2	2
SE6119-2-1.5	1.5	16	2	2
SE6619-2-.75	0.75	24	2	2
SE6619-2-1.0	1	24	2	2
SE6619-2-1.5	1.5	24	2	2
SE6118-2-1.0	1	16	1	2
SE6118-2-1.5	1.5	16	1	2

玻璃板

货号	产品描述	数量
SE6402	18 × 8cm Regular	2
SE6402LF	18 × 8cm Low Fluorescence	2
SE6402D	18 × 8cm Divider Plate, Notched	1
SE6102	18 × 16cm Regular	2
SE6102LF	18 × 16cm Low Fluorescence	2
SE6102D	18 × 16cm Divider Plate, Notched	1
SE6602	18 × 24cm Regular	2
SE6602LF	18 × 24cm Low Fluorescence	2
SE6602D	18 × 24cm Divider Plate, Notched	1

Divider Plate: 可在两块标准玻璃板中插入Divider Plate, 形成三明治结构, 在同一面运行两块胶

mimiVE/SE260/SE250

梳子

货号	样品孔			
	孔数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	每1mm深度的 上样体积(μl)
标准梳子	皆覆有特氟龙涂层, 梳子齿深25mm, *梳子齿深25mm			
SE211A-5-.75	5	0.75	13	9.8
SE211A-5-1.0	5	1	13	13
SE211A-5-1.5	5	1.5	13	19.5
SE211A-9-1.0	9*	1	5.8	5.8
SE211A-10-.75	10	0.75	4.8	3.6
SE211A-10-1.0	10	1	4.8	4.8
SE211A-10-1.5	10	1.5	4.8	7.2
SE211A-15-.75	15	0.75	2.9	2.2
SE211A-15-1.0	15	1	2.9	2.9
SE211A-15-1.5	15	1.5	2.9	4.4
SE211A-18-1.0	18*	1	2.9	2.9
制备型梳子	梳子齿深25mm, 可调节为10或15mm, 形成1个大的制备型样品孔和1小参比孔。			
SE211A-R-.75	1/1	0.75	68/5	51/3.8
SE211A-R-1.0	1/1	1	68/5	68/5
SE211A-R-1.5	1/1	1.5	68/5	120/7.5

*梳子构型与多道移液器兼容

T-Spacer

货号	厚度(mm)	长度(mm)	宽度(mm)	数量
SE2119T-2-1.0	1	8	1	2
SE2119T-2-1.5	1.5	8	1	2
SE2619T-2-075	0.75	10.5	1	2
SE2619T-2-1.0	1	10.5	1	2
SE2619T-2-1.5	1.5	10.5	1	2
SE2119T-2-.75	0.75	8	1	2

玻璃板/铝板

货号	产品描述	数量
SE202P-10	10 × 8cm Rectangular Glass Plates	10
SE202GN-5	10 × 8cm Notched Glass Plates	5
SE262P-5	10 × 10.5cm Rectangular Glass Plates	5
SE262GN-5	10 × 10.5cm Notched Glass Plates	5
SE202N	10 × 8cm Notched Alumina Plates	1
SE202N-1	10 × 8cm Notched Alumina Plates	10
SE262N-5	10 × 10.5cm Notched Alumina Plates	5



Divider Plate

HE系列经典型水平电泳仪

- 经典设计，在全世界拥有众多的使用者
- 胶盘自动定位、置中，防止漂浮、滑动
- HE99x Max

✓兼容多种凝胶(15cm宽，10,15或20cm长)规格，最多一次可分离60个样本

✓多种规格梳子供选择(见HE99X梳子订货信息)

- He33

✓7cm×10cm的凝胶规格，可在15分钟内完成最多32个样品的分离分析

✓胶盘具有很好的紫外透过率，可直接置于紫外灯箱上观测

✓预先在空心的电泳槽中注入了50%的乙二醇冷却剂，并可外接制冷循环系统，保证在高电压的情况下依然得到高分辨率的结果

✓电泳过程中一旦打开盖子，自动断电，确保实验安全



HE99X Max



HE33

Cat.#	Description
HE99X-15-1.5	HE99X Max Horizontal Unit, Complete
HE33-8-1.5	HE33 Mini Horizontal Unit, Complete

HE99X梳子订货信息

货号	样品孔				
	孔数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	每5mm深度的上样体积(μl)	数量
HE91A-P-1.5	1/2*	1.5	113/10	855/72.5	1
HE91A-P-3.0	1/2*	3	113/10	1710/145.5	1
HE91A-10-1.5	10	1.5	9.7	72.5	1
HE91A-10-3.0	10	3	9.7	145.5	1
HE91A-15-1.0	15	1	7.1	35.5	1
HE91A-15-1.5	15	1.5	7.1	53.5	1
HE91A-15-3.0	15	3	7.1	106.5	1
HE91A-20-1.0	20	1	4.7	23.5	1
HE91A-20-1.5	20	1.5	4.7	35.5	1
HE91A-20-3.0	20	3	4.7	70.5	1
HE91A-30-1.0	30	1	3	15	1

*为制备型梳子

HE33梳子订货信息

货号	样品孔				
	孔数	厚度 (mm)	宽度 (mm)	每1mm深度的上样体积(μl)	数量
HE31A-P-1.0	1/2*	1	6/1	235/35	1
HE31A-P-1.5	1/2*	1.5	6/1	355/50	1
HE31A-8-1.0	8	1	6.5	32.5	1
HE31A-8-1.5	8	1.5	6.5	48.5	1
HE31A-12-1.00	12	1	3.9	19.5	1
HE31A-12-1.5	12	1.5	3.9	30.5	1
HE31A-16-1.0	16	1	2.6	13	1
HE31A-16-1.5	16	1.5	2.6	20.5	1

*为制备型梳子

HE-PLUS内置电源水平电泳仪

产品特点

- 带有内置电源和LED阵列
- 电压、电流可调，10~400mA或10~150V
- 盖子通风设计，电泳时不会造成水汽凝结，便于观察电泳进程
- 凝胶拖盘可直接放置在紫外透照仪上观察
- 梳子与多道移液器兼容，方便上样

技术参数

电泳槽体积(w×l×h).....18.3×16.4×5.6cm

凝胶尺寸(w×l).....12.5×13.0cm

最大样品容量.....112samples(4combs, 28samples each)

缓冲液体积.....350ml

电极间距离.....13.5cm

仪器尺寸(w×l×h).....24.5×17.0×6.2cm



电源参数

输入电压.....AC100~240V, 50/60Hz

输出电压.....10 to 150 volts

输出电流.....10 to 400mA

最大功率.....45W

定时.....99hours 59min

安全开关.....电源带有微感应器

记忆功能.....自动记忆上一次电泳的电压和时间

安全认证.....TVE, CSA 和 CE

SUB系列现代型水平电泳仪



- 最新的设计，外型美观，色彩明亮
- 共有从迷你型到可制冷的高通量水平电泳仪9个型号，适合不同规模的实验操作
- SUBHT专门为96孔板设计，兼容多通道移液器，便于快速上样；透紫外跑胶盘印有荧光标签，对应96孔板的每个样品；(见下图)
- SUB13、SUB15、SUB20和SUB25可连接蠕动泵进行Buffer循环，维持电泳过程中Buffer的PH值和浓度的稳定
- SUB20C和SUB25C可外接制冷循环，精确控温，在高压下也可达到良好的分辨率
- 胶盘自动定位、置中，防止漂浮、滑动
- 胶盘具有很好的紫外透过率，可直接置于紫外灯箱上观测
- 侧面扶手设计，可安全方便的移动仪器



SUB15



SUB25C

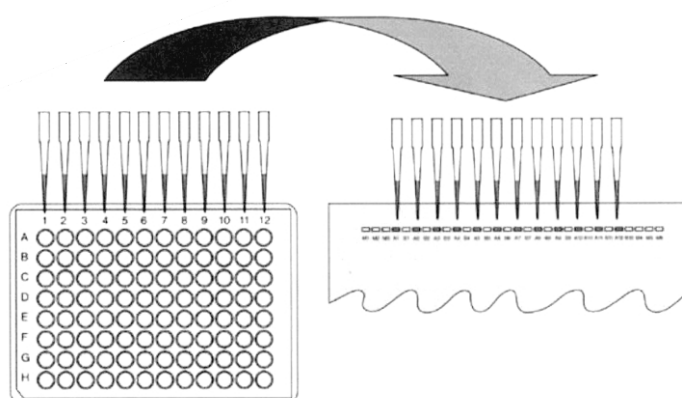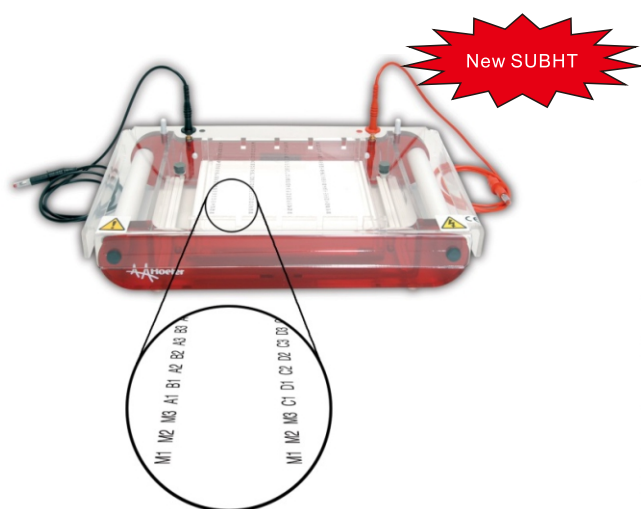

订货信息机选择指南

Cat.#	Description	Gel Size(wx l cm)	Maximum Sample Capacity	Buffer volume(ml)
SUBHT	High throughput submarine gel electrophoresis unit	15x15	120	1200
SUB6	Mini Submarine Gel Unit	6x7.5	32	325
SUB10	Mini-Plus Submarine Gel Unit	10x11.5	80	450
SUB13	Midi Submarine Gel Unit	12.8x15	112	900
SUB15	Standard Submarine Gel Unit	15x15	120	1200
SUB20	Maxi-Standard Submarine Gel Unit	20x20	160	2200
SUB20C	Maxi-Standard Submarine Gel Unit With Cooling Base	20x20	160	2200
SUB25	Maxi-Plus Submarine Gel Unit	25x30	624	3000
SUB25C	Maxi-Plus Submarine Gel Unit with Cooling Base	25x30	624	3000

转印产品选择指南

	产品型号	转印面积 (长×宽, cm)	凝胶数量 (同时转移)	缓冲液体积	热交换器	内置电源
半干	TE70XP	14×16	4(迷你胶)	0.5L	无	有
	TE70X	14×16	4(迷你胶)	0.5L	无	无
	TE77XP	21×26	12(迷你胶)	0.5L	无	有
	TE77X	21×26	12(迷你胶)	0.5L	无	无
槽式	TE22	9×10	4	1L	内置	无
	TE42	15×21	4(不配热交换器)	5L	选配	无
			2(配热交换器)			
	TE62	15×21	4	5L	内置	无

半干电转印系统

- 只需极少的缓冲液浸湿膜和滤纸，即可在1小时内完成转印
- 耐用的铂涂层钛和不锈钢电极可防止污染，进行有效的转印
- 电极独特的穿孔设计使得转印时的激光有效散发，提供更好的转印结果
- 半干转印需要的电流更低，产热更少，有利于保持蛋白的生物活性
- TE70X/TE70XP最大转印面积为14×16cm，可一次性转印4块迷你型凝胶
- TE77X/TE77XP最大转印面积为21×26cm，可一次性转印12块迷你型凝胶
- TE70XP和TE77XP带有内置电源，可避免转印过程中的过热现象



订货信息

货号	产品描述	数量
TE70XP	Semi-Dry Transter Unit With Built-In Power Supply 包含：主机, 25 sheets of Blotter Paper(14×16cm), 50 sheets of Porous Cellophane(20×35.5cm) and 2pcs of Mylar Masks(16.5×18.5cm)	1
TE77XP	Large Semi-Dry Transter Unit With Built-In Power Supply 包含：主机, 25 sheets of Blotter Paper(21×26cm), 50 sheets of Porous Cellophane(20×35.5cm) and 2pcs of Mylar Masks(23×27.5cm)	1
TE70X	Semi-Dry Transter Unit 包含：主机, 附件同TE70XP	1
TE77X	Large Semi-Dry Transter Unit 包含：主机, 附件同TE77XP	1

槽式电转印系统

- 全湿电转印系统，开放网格的卡夹式设计提高了转印的效率，散热效果更好
- 转印快速高效，1小时内即可完成
- TE22
 - √设计小巧，一次最多可转印4块9×10cm凝胶，仅需1L缓冲液
 - √内置铝制热交换器，可接外循环水浴进行有效控温
- TE42
 - √标准型，可选配TE47铝制热交换器，再外接循环水浴进行有效控温
 - √最多可转印2块(配热交换器)或4块15×21cm凝胶
- TE62
 - √标准型，内置铝制热交换器，可外接循环水浴
 - √一次性可转印4块15×21cm凝胶



槽式转印仪订货信息

货号	产品描述	数量
TE22	Mighty Small Transfer Tank 包含：Lower Chamber w/Heat Exchanger,Safety Lid w/High Voltage Leads,2 pcs of Electrode Panels,4 pcs of Cassettes,4 pcs of 6 mm thick Foam Sponges,8 pcs of 3 mm thick Foam Sponges, Cassette Hook and 25 sheets of Blotter paper(9×10.5cm)	1
TE42	Standard Transfer Tank 包含：Lower Chamber,Safety Lid w/High Voltage Leads,2 pcs of Electrode Panels,2 pcs of Cassettes,2 pcs of 6 mm thick Foam Sponges,4 pcs of 3 mm thick Foam Sponges, Cassette Hook and 25 sheets of Blotter paper(14.5×21.5cm)	1
TE62	Standard Transfer Tank with Cooling Chamber 包含：同TE22，除25 sheets of Blotter Paper的尺寸为14.5×21.5cm	1
TE47	Heat Exchange Module	1

SE100 PlateMate玻璃板清洗和储存盒

- 采用方便的架子和带盖的盒子来浸泡玻璃板，冲洗和储存多块玻璃板
- 保护玻璃板在处理 and 保存过程中免受损坏
- 适用于8×10cm到18×16cm的玻璃板
- 可放置10个10–18cm的玻璃板或20个8cm的玻璃板

订货信息

货号	产品描述	数量
Se100	PlateMate Washer and Storge Kit（包含2个玻璃板支架，2个长坂适配器，2个防尘罩和1个带盖的清洗槽）	1



SE 100 kit

SG系列梯度胶制备器

- 可配制梯度凝胶，还可用于生成液相层析的洗脱液、蔗糖或氯化铯等离心介质的密度梯度
- 有两个聚丙烯塑料材质的试剂舱链接而成
- 磁力搅拌器混合，防止气泡产生而影响聚合过程
- 防渗漏的特氟龙阀门，介质混合和流出过程同步，尽量减少逆流的产生
- 按照制备体系大小的不同，共有5种型号
- Sg100：可同时制备2到4块迷你型垂直电泳凝胶
- SG500：可同时制备10块左右标准垂直电泳凝胶

订货信息

货号	产品描述	数量
SG15	Gradient maker, 15 ml total volume	1
SG30	Gradient maker, 30 ml total volume	1
SG50	Gradient maker, 50 ml total volume	1
SG100	Gradient maker, 100 ml total volume	1
SG500	Gradient maker, 500 ml total volume	1



SG15



SG30



SG100



SG500

Hoefer IEF100—向等电聚焦系统

—实时监测每个IPG胶条

产品特点

- 灵活的一向IEF可以运行6根7–24cm的IPG胶条
- 不同长度胶条，无需更换聚焦盘，移动电极位置即可
- 实时图形化监控每根胶条，防止胶条过热现象
- 12000V的电压提供更快的分离速度
- 预置9种常用Protocol，保证结果重复性
- 可存储30个Protocol，屏显操作便于灵活编辑
- 美国设计和制造，具有安全认证



双电极组装拓展IEF通量—可同时运行12根7cm胶条，左右两组电泳结果高度一致

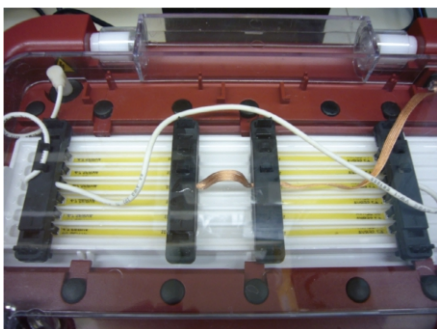


Figure 1 IEF100 with dual-electrode module enabling six pairs of IPG strips to be run in parallel circuit.

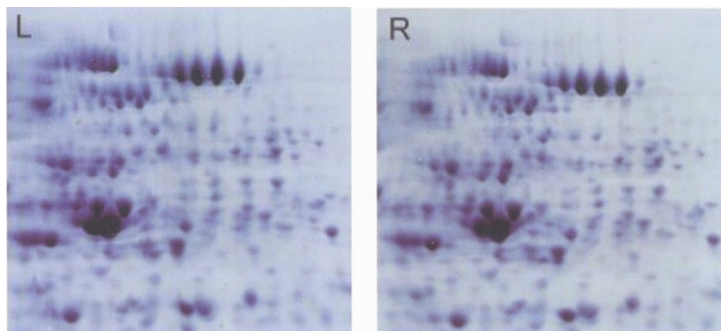


Figure 2 Identical regions enlarged from 2-D gels showing reproducibility of duplicate IPGs run simultaneously with left(L) or right(R) electrode pairs wired in parallel. IPGs were PH 3-10 non-linear. SDS-PAGE was performed on 11% polyacrylamide gels.

IEF100技术参数

- 容量：1–6根IPG胶条，7–24cm
- 最大电压：12,000V
- 最高电流：10mA
- 电流分辨率：1 μ l
- 温控范围：peltier制冷，15–25°C
- 上样容量：240 μ l (杯上样)
- 胶槽：运行和水化
- 尺寸(w×h×d)：38×19×27cm
- 重量：6kg
- 数据连接：以太网/RS232
- 认证：EN61326:1998, CE, WEEE, ROHS

Cat.#	Description
IEF100	Isoelectric Focusing Unit; Includes: 252 Wicks, 1 Running Tray, 1 Rehydration Tray, 1 Cleaning Brush, 1 Set of Forceps, and 10 Sets of Running Cups (Each Set Containing 6 Sample Cups)



Mouse Liver separation using the Hoefer 2-D System and 4–7 IPG Strips. Image courtesy of Prof. Peter James and Dr. Sofia Waldemarson, Department of Immunotechnology, Lund University, Sweden.

迷你2D电泳系统
(适用于7cm IPG胶条)

Cat.#	Description
526003	Mini 2- D Combination Package
	Package Includes:
IEF100	Isoelectric Focusing Unit
SE260-10A-.75	Mighty Small Mini Deluxe Vertical Unit
SE2619T-2-1.0	T-Spacers, 1.0mm Thick(qty.2)
PS300B	300V, 500mA, 90W Power Supply



标准2D电泳系统
(适用于11–13cm IPG胶条)

Cat.#	Description
560003	Standard 2- D Combination Package
	Package Includes:
IEF100	Isoelectric Focusing Unit
SE600-15-1.5	Deluxe Dual Cooled Vertical Unit
PS300B	300V, 500mA, 90W Power Supply



大型2D电泳系统
(适用于17–24cm IPG胶条)

Cat.#	Description
590003-230V	Large 2- D Combination Package
	Package Includes:
IEF100	Isoelectric Focusing Unit
Se900	Large Format Vertical Electrophoresis Unit
SE9102-1-1.0	Large Hinged Glass Cassettes(qty.6)
SE915	Large Multiple Gel Caster
PS600	600V, 750mA, 150W Power Supply



通用型稳压电源选择指南

订货信息

产品型号	最大电压(V)	最大电流(mA)	最大功率(W)	程序编辑	最大通道数	输出模式
PS300B	300	500	90	不可以	4	恒压/恒流
PS200HC	200	2000	200	不可以	4	恒压/恒流
PS600	600	750	150	可以	4	恒压/恒流/恒功率

技术参数

型号	PS300B	PS200HC	PS600
电压(V)	10-300	5-200	5-600
电压步进	1V	1V	1V
电流(mA)	4-500	10-2000	3-750
电流步进	1mA	1mA	1mA
功率(W)	90	200	150
定时	0-999min	0-999min	0-999min
恒压模式	Yes	Yes	Yes
恒流模式	Yes	Yes	Yes
恒功率模式	No	No	Yes
编程	不可以	不可以	可以 可储存9个程序
规格(cm) (W×L×D)	12.5×33.5×28	12.5×33.5×28	12.5×33.5×28
重量(kg)	2.4	2.4	2.4
输出通道	4组, 4mm	4组, 4mm	4组, 4mm
安全认证	EN61010-1,CE	EN61010-1,CE	EN61010-1,CE



PS200HC



PS300B



PS600



代理商信息

豪沃生物科技（上海）有限公司

地址：中国上海市长宁区中山西路1065号

SOHO中山广场B座19楼1902E室 200051

电话：+86 21-2230 5128

网址：www.harvardapparatus.com

邮箱：china@harvardapparatus.com